

Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons


NOM de Naissance : 1^{er} PRENOM de Naissance :
 NOM utilisé : PRENOM utilisé :
 Lieu de Naissance : Liste des prénoms de Naissance :
 DATE de Naissance : SEXE :

Indication : Le recueil d'urine sur collecteur stérile est indiqué dans le cas :

- Des **nourrissons** : la miction volontaire par recueil des urines dans un flacon à ECBU, est à privilégier. Mais si cela n'est pas possible le recueil est effectué grâce à une poche stérile en procédant comme indiqué ci-dessous.
- D'une **urétérostomie (sans sonde)** : après nettoyage soigneux de la stomie, mettre en place un collecteur stérile en procédant comme ci-dessous.

Préconisations de recueil

- Se laver très soigneusement les mains puis nettoyer soigneusement la zone urogénitale à l'eau et au savon neutre ou à l'aide de la lingette fournie par le laboratoire. Un antiseptique peut être utilisé sur prescription médicale. Bien sécher la peau.
- Sortir la poche stérile de son emballage individuel et retirer la protection qui couvre la partie adhésive. Appliquer en massant pour obtenir une bonne adhérence.
- **Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur.**
- Une fois l'urine émise, détacher doucement la poche en tirant un coin.
- Puis prélever directement les urines dans le collecteur à l'aide du dispositif fourni par le laboratoire : plonger la canule dans l'urine, sans avoir touché la partie en contact avec l'urine.
- Puis enfoncer le tube comme sur le schéma ci-dessous :

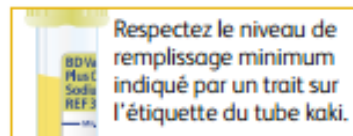

- Ne jamais identifier les tubes avant d'avoir effectué le prélèvement. Identifier avant de sortir de la salle de prélèvement : les prélèvements, la fiche de suivi médical selon l'instruction [IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements »](#). Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.

Identifiez les échantillons

avec vos nom, prénom et date de naissance ou étiquettes à N° unique

Merci de renseigner les informations ci-dessous

ID Préleveur :

Date / heure du recueil

Température de conservation avant dépose

- ambiante
- réfrigérée

Antibiotiques en cours :

- OUI NON
- Si NON date éventuelle de l'arrêt du traitement :

Contexte clinique :

- urine souvent
- fièvre
- diabète
- immunodépression
- préopératoire
- autre, préciser :

Renseignements :

intervention sur les voies urinaires dans le trimestre précédent – si oui, préciser :

hospitalisation dans le trimestre précédent :
 oui non

En cas d'urétérostomie :

- uretère droit
- uretère gauche

Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire

Analyse	Stabilité avant traitement (Pot à ECBU)		Traitement	Stabilité après traitement (Tubes)	
	15-25°C	2-8°C		15-25°C	2-8°C
ECBU	< 2h	< 12h	Kaki (2)	< 24h	
Chimie Urinaire	< 8h		Beige (1)	< 8h	