

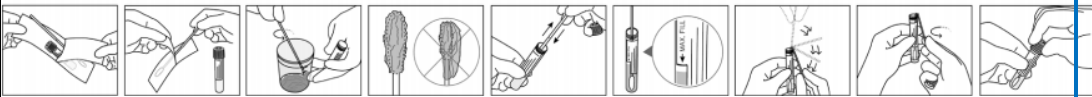
Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM de Naissance : 1er PRENOM de Naissance :

NOM utilisé : PRENOM utilisé :

Lieu de Naissance : Liste des prénoms de Naissance :

DATE de Naissance : SEXE :

Préconisations de recueil	
RECUEIL DE SELLES A VISEE MICROBIOLOGIQUE : BACTERIOLOGIE ET VIROLOGIE	
Le prélèvement doit être effectué de préférence avant traitement antibiotique. Cet examen est à réaliser si possible lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable d'effectuer cet examen à distance de tout traitement à visée intestinale (charbon, suppositoires, autres laxatifs, etc...) - Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. - Sauf contexte particulier, la recherche de <i>Clostridium difficile</i> n'est effectuée que sur selles non moulées. - Pour la Coproculture, procéder au transfert d'un échantillon de selles dans le KIT Fecal SWAB comme ci-après :	
	
Ouvrir le sachet pour libérer l'écouvillon. Mettre l'extrémité renflée en contact avec les selles de façon à prélever un échantillon représentatif sans trop charger l'écouvillon et sans dépasser le renflement. Placer l'écouvillon dans le tube en faisant en sorte que la ligne de cassure coïncide avec le bord du tube. Casser l'écouvillon et reboucher le tube. RAMENER LE POT DE SELLES AVEC LE TUBE FECAL SWAB. NB : Cas des prélèvements sur couche, idéalement dès l'émission des selles, utiliser l'écouvillon pour procéder au recueil des selles comme indiqué ci-dessus. <u>Remarque</u> : sur prescription médicale, un écouvillonnage rectal peut se révéler utile chez le nourrisson et le petit enfant. Dans ce cas introduire l'écouvillon au contact de la muqueuse rectale.	
PARASITOLOGIE DES SELLES	
Le prélèvement doit être effectué dans les 1ers jours des symptômes. Cet examen est à réaliser si possible lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de l'effectuer à distance de tout traitement à visée intestinale (charbon, suppositoires, autres laxatifs, etc...) - Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. - Un régime pauvre en fibres végétales dans les jours précédents l'examen est recommandé. - La répétition (3 fois sur 10 jours environ) permet d'accroître la sensibilité de l'examen. - Pour la recherche d'Oxyures, le scotch-test est l'examen le plus sensible.	
SCOTCH TEST	
A effectuer de préférence au laboratoire. A effectuer au lever avant la toilette et avant les premières selles. - Décoller le scotch et prendre un morceau de 5cm environ (scotch Cristal transparent et non opaque acheté dans le commerce). - Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes. - Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support fournie par le laboratoire. - Renouveler l'opération avec un deuxième morceau de scotch. - Remplacer les 2 lames dans l'étui fourni par le laboratoire.	

Identifiez les échantillons avec vos nom, prénom et date de naissance ou étiquettes à N° unique

Merci de renseigner les informations ci-dessous

ID Préleveur :
.....

Date / heure du recueil
.....

Température de conservation avant dépose :

☐ ambiante
☐ réfrigérée

Contexte clinique :

☐ Fièvre

☐ Sang dans les selles

☐ diarrhée aigue

☐ diarrhée chronique

☐ Intoxication alimentaire (si oui préciser aliment suspecté) :

☐ plusieurs cas de diarrhée dans l'entourage

☐ Autre contexte (si oui préciser) :

Traitement anti-infectieux (Nom) :
.....

☐ Aucun

☐ Antibiotique oral en cours

☐ Antibiotique oral récent (<10j)

Pour un examen parasitologique :

☐ Prurit anal

☐ Voyage récent en pays tropical : ☐ NON ☐ OUI :

Pays du séjour :

Durée du séjour :

Date de retour :

IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS			
Conditions de CONSERVATION et d'acheminement au laboratoire			
Examen prescrit	Matériel	Stabilité	
		15-25°C	2-8°C
☐ <u>Coproculture standard</u> : <i>Recherche de Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia...</i>	FecalSwab (vert)  (Ramener le pot de selles avec l'écouvillon)	24h	24h
	Pot stérile 	2h	24h
		2h	48h
		24h	5j
☐ Recherche de virus : Rotavirus, Adénovirus, Norovirus Groupe I e II		4h	12h
☐ Recherche de <i>Clostridium difficile</i>			
☐ Examen parasitologique des selles			
☐ <u>Scotch test</u> : Recherche d'Oxyures		7j	7j

Ne jamais identifier les flacons avant d'avoir effectué le prélèvement.
 Identifier : les prélèvements, la fiche de suivi médical et les autres documents annexes le cas échéant selon l'instruction [IT-MU0-005 « Identification des patients et des prélèvements »](#).
 Regrouper l'ensemble (prélèvements + documents) dans un conditionnement unique par patient.